



WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO

im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi

PRZEZNACZENIE

IP MEDYCZNY
Med

INDYWIDUALNY PAKIET

„Trenuj do ostatniej kropli potu,
Walcz do ostatniej kropli krwi”

INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE MEDYCZNE ŻOŁNIERZA

INDYWIDUALNY PAKIET MEDYCZNY (IPMed)

Zestaw Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed) stanowi indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza, które **przeznaczone jest do ochrony życia i zdrowia w warunkach środowiska taktycznego.**



INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE MEDYCZNE ŻOŁNIERZA

INDYWIDUALNY PAKIET MEDYCZNY (IPMed)

Indywidualny Pakiet Medyczny został opracowany w oparciu o dostępne statystyki z zakresu etiologii urazów współczesnego pola walki oraz doświadczenia własne Wojskowej Służby Zdrowia.



ZAPAMIĘTAJ!!!

Materiały i środki medyczne,
które znajdują się w pakiecie umożliwiają
udzielenie samopomocy lub pomocy
koleżeńskiej przy założeniu,
że każdy żołnierz odbył stosowne szkolenie
z udzielania pierwszej pomocy w warunkach
pola walki.





SKŁAD ZESTAWU IPMed

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Typ/rozmiar	Okres ważności wg producenta	Sposób użycia
1	opatrunek osobisty	1	10-15 cm i długości 4-5 m	5 lat	jednorazowy
2	opatrunek hemostatyczny	1	OuikClot Combat Gauze lub Celox Gauze	3 lata	jednorazowy
3	gaza wypełniająca	1	S lub Z-Pak	5 lat	jednorazowy
4	opaska zaciskowa (staza taktyczna)	1	CAT (kolor czarny)	nie określony	jednorazowy
5	opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej	1	BCS (Bolin Chest Seal)	3 lat	jednorazowy
6	rurka nosowo-gardłowa z żelem wodnym	1	tworzywo sztuczne lub silikon, rozmiar 30FR	5 lat (żel 3 lata)	jednorazowy
7	nożyczki ratownicze	1	z okrągłym (bezpiecznym) ostrzem o całkowitej długości do 16,5 cm	nie określony	wielokrotny
8	rękawice ratownicze	1	nitrylowe lub chloroprenowe, kolor niebieski, rozmiar XL	4 lata	jednorazowy



SKŁAD ZESTAWU IPMed



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPAKOWANIE ZESTAWU IPMED


Opakowanie zestawu IPMed wyposażone jest w system taśm przewlekanych oraz w dodatkowy panel udowy. System mocowania umożliwia noszenie zestawu na kamizelce taktycznej lub kuloodpornej, udzie oraz pasie głównym.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPAKOWANIE ZESTAWU IPMED


IPMed powinien być eksploatowany w temperaturze otoczenia **0°C +45°C**. **W niskiej temperaturze zamrożeniu może ulec żel wodny** dołączony do rurki nosowo-gardłowej. W miarę możliwości należy unikać zalewania zestawu wodą.

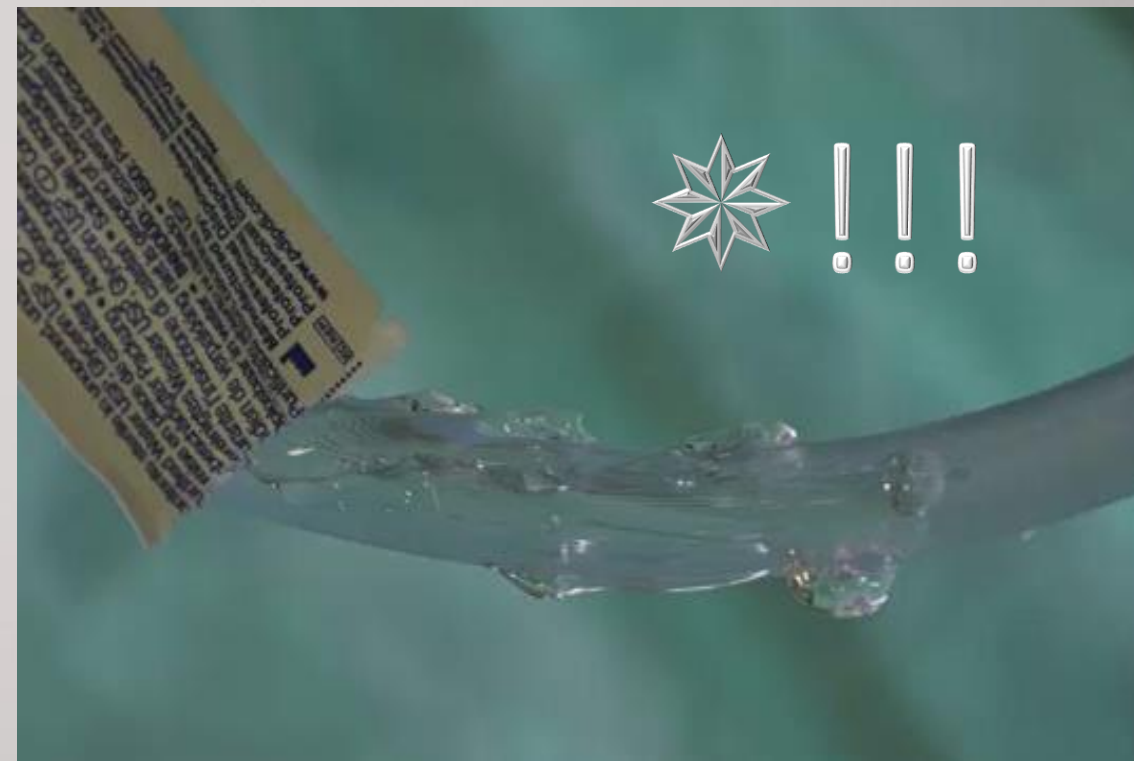

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPAKOWANIE ZESTAWU IPMED


Zalecenia dotyczące czyszczenia opakowania zestawu:

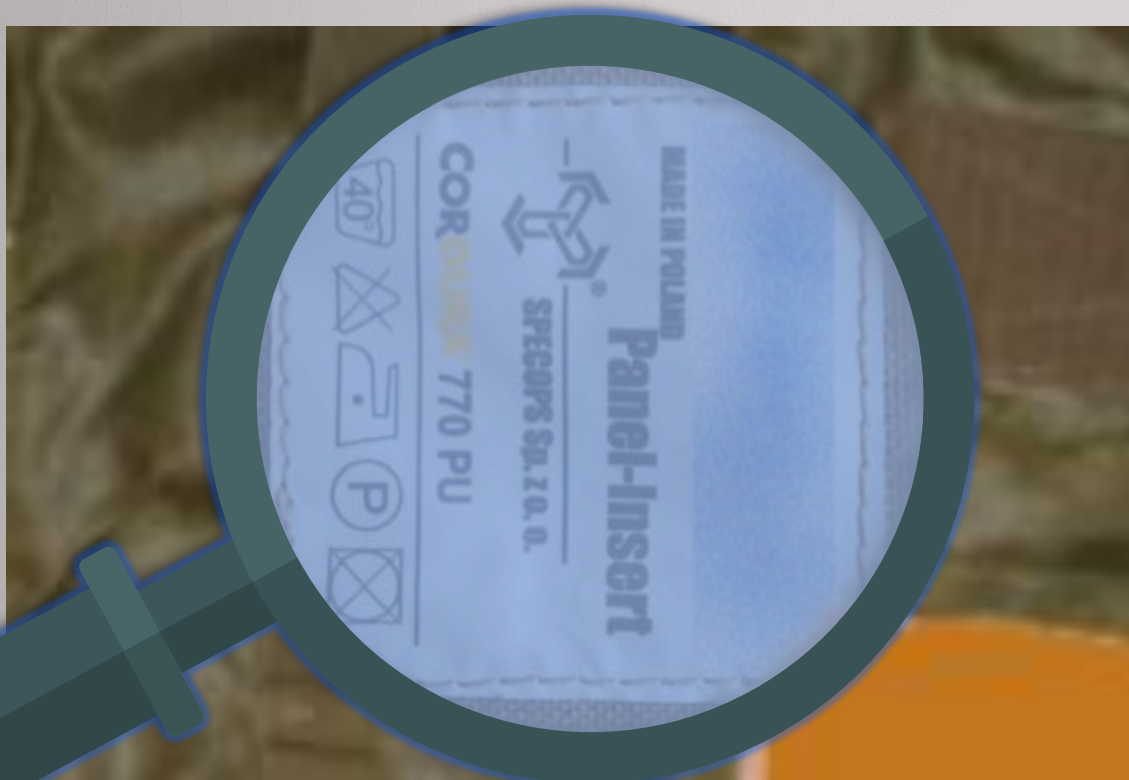


Nie prać (nie czyścić) w wodzie o temperaturze wyższej niż 40°C



Nie stosować wybielaczy

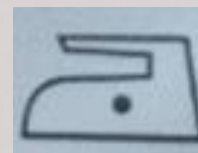

Nie prasować powyżej 110°C

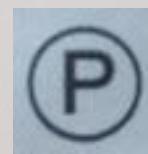

Nie stosować chemicznych środków czyszczących (wyjątek – profesjonalne pranie chemiczne w benzynie ciężkiej)



Nie suszyć mechanicznie

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPATRUNEK OSOBISTY - TYPU OLAES

Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPATRUNEK OSOBISTY - TYPU OLAES

- Wyposażony w specjalną zapinkę uciskową na bandażu pełniącą funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku
- Konstrukcja opatrunku wyposażona w rzep uniemożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża
- Plastikowa folia może służyć jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej lub opatrunek osłaniający np. w przypadku wytrzewienia
- Gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY TYP QUIKCLOT COMBAT GAUZE

Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności ran głębokich zlokalizowanych w pachwinach, pachach oraz szyi w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie opaski zaciskowej.

ZAPAMIĘTAJ!!!



Zabrania się używania w obrębie tułowia osoby poszkodowanej!



Źródło: Instrukcja eksploatacyjna Zestawu Indywidualny
Pakiet Medyczny (IPMed)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY TYP QUIKCLOT COMBAT GAUZE

Wysoka efektywność hemostatyczna

Natychmiastowa gotowość do użycia

Bezpieczeństwo stosowania: brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu (ograniczona reakcja egzotermiczna) nie jest wchłaniany przez organizm i nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany)



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

GAZA WYPEŁNIAJĄCA TYP Z-PACK

Gaza 100% bawełny, jałowa, w kolorze białym, silnie wchłaniająca.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

GAZA WYPEŁNIAJĄCA TYP Z-PACK – ZASADA UŻYCIA

Wyjąć gazę z opakowania zewnętrznego

Wyciągać gazę za jeden koniec z folii zabezpieczającej

Użyć gazy do oczyszczenia okolic krwawiącej rany lub/i dodatkowego wypełnienia wcześniej użytego opatrunku hemostatycznego typu QUIKLOT COMBAT GAUZE



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPATRUNEK NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ - BCS (BOLIN CHEST SEAL)


Konstrukcja opatrunku: wentylowy, z trójdzielną zastawką jednokierunkową. Jałowy samoprzylepny, z silnym klejem pozwalającym na przyklejenie na mokre ciało.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

RURKA NOSOWO-GARDŁOWA

Służy do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych w warunkach taktycznych. Ranni, którzy nie są głęboko nieprzytomni tolerują rurkę nosowo-gardłową, lepiej niż rurkę ustno-gardłową.

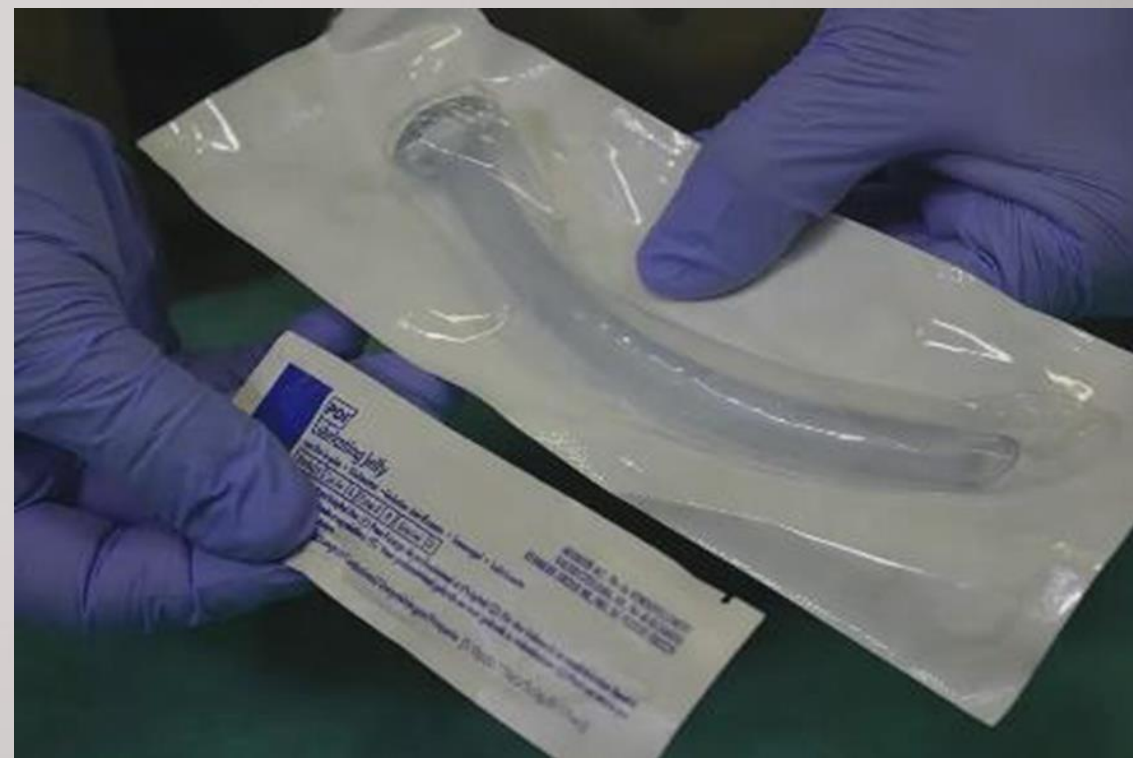

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

RURKA NOSOWO-GARDŁOWA

- W zestawie lubrykant w żelu (obojętny farmakologicznie), ułatwiający zakładanie rurki, jednorazowe opakowanie 3-5 g
- Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego
- Wykonana z miękkiego silikonu
- Sterylna
- Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę
- Łatwe do otworzenia miękkie opakowanie papierowo-foliowe (umożliwiające dowolne formowanie kształtu)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

NOŻYCZKI RATOWNICZE

Powinny być stosowane jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia munduru oraz jako wyposażenie pomocnicze przy opatrywaniu ran.





ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

NOŻYCZKI RATOWNICZE

- Ostrze wykonane z twardej stali lub tytanu - umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, elementów skórzanych, pasów bezpieczeństwa oraz cienkich metalowych przedmiotów
- Ząbkowane ostrze nie wymagające ostrzenia
- Wygięte
- Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania

ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

RĘKAWICE RATOWNICZE

Jeżeli jest to możliwe, wszystkie czynności związane z opatrywaniem ran powinny być prowadzone w rękawiczkach ochronnych.

- Jednorazowego użytku, niesterylne
- Nitrylowe
- Hipoalergiczne, lateksowe, niepudrowane



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPASKA ZACISKOWA (STAZA TAKTYCZNA TYPU CAT)

Konstrukcja opaski pozwala na jej szybkie założenie jedną ręką na każdą z kończyn z możliwością szybkiej regulacji długości. Posiada system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem (np. zahaczenie o elementy otoczenia).



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPASKA ZACISKOWA (STAZA TAKTYCZNA TYPU CAT)



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPASKA ZACISKOWA (STAZA TAKTYCZNA TYPU CAT)

Zastosowanie: krwotoki z kończyn, amputacje urazowe. Możliwość zastosowania: założenie na kończynie górnej lub dolnej osobie poszkodowanej w ramach pomocy wzajemnej, możliwość założenia przez rannego żołnierza samodzielnie w ramach samopomocy - na każdej kończynie.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPASKA ZACISKOWA (STAZA TAKTYCZNA TYPU CAT)

System naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego typu kołowrót, system umożliwia płynną regulację siły naciągu.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA IPMed

OPASKA ZACISKOWA (STAZA TAKTYCZNA TYPU CAT)

Zapinanie opaski odbywa się za pomocą taśmy samozaczepnej „rzep” lub za pomocą zaczepu unieruchamiającego kołowrót.





ZAPAMIĘTAJ!!!

PAMIĘTAJ!!!

Jeśli będziesz udzielać pomocy
poszkodowanemu, w pierwszej kolejności
używaj wyposażenia Indywidualnego Pakietu
Medycznego (IPMed) tej osoby.



ZAPAMIĘTAJ!!!

**Posiadanie profesjonalnego wyposażenia,
Twoja umiejętność w zakresie posługiwania
się nim, znajomość zasad udzielania pomocy
medycznej na polu walki, w sposób istotny
zwiększają szanse na przeżycie ранego.**

